

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
15 septembre 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/085292 A2

(51) Classification internationale des brevets⁷ :
C07K 19/00

Pierre Blanc, F-69001 Lyon (FR). **JOLIVET-REY-NAUD, Colette** [FR/FR]; 29, route Nationale, F-69720 Saint Bonnet de Mure (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2005/050132

(74) Mandataire : **BITAUD, Valérie**; BioMérieux, Chemin de l'Orme, F-69280 Marcy l'Etoile (FR).

(22) Date de dépôt international : 1 mars 2005 (01.03.2005)

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0450426 3 mars 2004 (03.03.2004) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
BIOMERIEUX [FR/FR]; Chemin de l'Orme, F-69280 Marcy l'Etoile (FR).

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO,

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) :
BUSSERET-MICHEL, Sandrine [FR/FR]; 16, rue

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR DETECTING THE ACTIVATABLE FREE FORM OF PSA AND THE USE THEREOF FOR DIAGNOSING BENIGN PATHOLOGIES OF THE PROSTATE AND ADENOCARCINOMA OF THE PROSTATE

(54) Titre : PROCEDE DE DETECTION DE LA FORME LIBRE ACTIVABLE DU PSA ET SON UTILISATION POUR LE DIAGNOSTIC DES PATHOLOGIES BENIGNES DE LA PROSTATE ET DE L'ADENOCARCINOME DE LA PROSTATE

(57) Abstract: The invention relates to an *in vitro* diagnostic method for diagnosing a benign pathology of the prostate or an adenocarcinoma of the prostate characterized by comprising a step for detecting the activatable free form of PSA in a biological sample from a patient suspected of having developed a benign pathology of the prostate or an adenocarcinoma of the prostate. This diagnostic method can be carried out by the following steps consisting of: i) bringing a binding partner capable of specifically binding to the activatable free PSA in contact with a biological sample from a patient suspected of having developed a benign pathology of the prostate or an adenocarcinoma of the prostate; ii) detecting the capture of the activatable free form of PSA by said binding partner; iii) calculating the ratio between the quantity of the activatable free form of PSA detected in step ii) and the quantity of a form of PSA other than the activatable free form present in a sample of the same type taken from the same subject, and; iv) determining if the patients are affected by an adenocarcinoma of the prostate or by a benign pathology of the prostate by comparing the value of the ratio determined in step iii) with a predetermined threshold value selected according to the type of ratio used and representative of the detection limit of each pathology.

(57) Abrégé : La présente invention a pour objet un procédé de diagnostic *in vitro* d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape de détection, dans un échantillon biologique issu d'un patient suspecté d'être atteint d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate, de la forme libre de PSA activable. Ce procédé de diagnostic peut être mis en œuvre par les étapes consistant à : i) mettre en contact un partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable avec un échantillon biologique issu d'un patient suspecté d'être atteint d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate, ii) mettre en évidence la capture de la forme libre activable du PSA par ledit partenaire de liaison, iii) calculer le rapport entre la quantité de forme libre activable de PSA détectée dans l'étape ii) et la quantité d'une forme de PSA autre que la forme libre activable, présente dans un échantillon de même nature prélevé chez le même sujet, et iv) déterminer si les patients sont affectés par un adénocarcinome de la prostate ou par une pathologie bénigne de la prostate en comparant la valeur du rapport déterminé dans l'étape iii) à une valeur-seuil prédéterminée, choisie selon le type de rapport utilisé et représentative de la limite de détection de chaque pathologie.

WO 2005/085292 A2



SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

- *relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)) pour US seulement*

Publiée :

- *sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport*

- *avec la partie réservée au listage des séquences de la description publiée séparément sous forme électronique et disponible sur demande auprès du Bureau international*

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- 1 -

Procédé de détection de la forme libre activable du PSA et son utilisation pour le diagnostic des pathologies bénignes de la prostate et de l'adénocarcinome de la prostate

La présente invention concerne le diagnostic des adénocarcinomes de la prostate.

5 En particulier, l'invention a pour objet un procédé de diagnostic d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate chez un patient soupçonné d'être atteint de telles pathologies par utilisation de partenaires de liaison capables de reconnaître l'antigène spécifique de la prostate (ou PSA, pour Prostate Specific Antigen) spécifiquement sous sa forme libre activable.

10 Le PSA est produit par l'épithélium glandulaire de la prostate humaine, probablement sous une forme zymogène inactive (Lundwall *et al.* FEBS Lett. 1987), et est sécrété dans le liquide séminal sous sa forme active (Lilja, J. Clin Invest 1985). L'activité biologique du PSA dans le liquide séminal est liée à sa fragmentation protéolytique limitée des protéines prédominantes sécrétées par les vésicules séminales (Lilja, J. Clin Invest 1985 ; Lilja
15 *et al.* J. Clin Invest 1987 ; Mc Gee *et al.* Biol. reprod. 1988).

Le PSA est le principal marqueur du cancer de la prostate qui affectera, au cours de sa vie, un homme sur six en Occident. Cette protéase de la famille des kallikréines, principalement sécrétée par l'épithélium prostatique, est retrouvée à une concentration de 0,5 à 5 mg/ml dans le liquide séminal et à une concentration un million de fois moindre dans le sérum
20 d'un patient. Ainsi, le PSA est trouvé normalement à une concentration inférieure à 2,5 ng/ml dans le sérum. Cependant, cette concentration augmente en principe notablement lors d'un cancer de la prostate et lors d'altérations bénignes telles que l'hypertrophie de la prostate bénigne (BPH) ou la prostatite aiguë.

La séquence protéique du PSA a été déterminée. Il s'agit d'une glycoprotéine
25 comportant 237 acides aminés ("Molecular cloning of human prostate specific antigen cDNA". Lundwall A., Lilja H., 1987. *FEBS Lett* 214 : 317-322).

Il a été proposé une méthode de diagnostic consistant à mesurer la concentration en PSA sérique et à la comparer à une valeur-seuil qui est de 4 ng/ml. Toutefois, on a constaté que cette méthode de diagnostic conduit à suspecter à tort trois patients sur quatre, ce qui est

préjudiciable. De plus, cette méthode ne permet pas de diagnostiquer 30 à 45% des cas de cancers confinés à la glande, ce qui constitue pourtant un stade précoce de la maladie potentiellement curable dont le diagnostic serait donc particulièrement souhaitable. Le caractère peu satisfaisant de cette méthode est d'ailleurs démontré par l'étude rapportée dans l'article

5 "Prostate Cancer Detection in Men With Serum PSA Concentrations of 2.6 to 4.0 ng/ml and Benign Prostate Examination", Catalona *et al.*, JAMA, 14 Mai 1997 – Vol. 277, No. 18, qui montre que la valeur-seuil doit être inférieure à 4 ng/ml pour dépister précocement un cancer de la prostate.

Par ailleurs, il a été montré que dans le sérum, le PSA s'associait à des inhibiteurs

10 de protéase, tels que l' α -1-antichymotrypsine (ACT), et l' α -2 macroglobuline (A2M). Ces associations entraînent l'inactivation de l'activité chymotrypsique du PSA, comme cela a été démontré dans l'article "Enzymatic activity of prostate specific antigen and its reactions with ultracellular serine proteinase inhibitors" A. Christensson, C.B. Laurell, H. Lilja, 1990 Eur. J. Biochem 194 : 755-763. Ceci a également permis de mettre en évidence que le PSA présent

15 dans le sérum était soit sous forme libre, c'est-à-dire non associé, soit sous forme complexée, c'est-à-dire associé. L'usage du ratio PSA libre sur PSA total a alors été proposé afin d'améliorer la spécificité du diagnostic.

Ainsi, la demande de brevet WO97/12245 décrit une méthode permettant de diagnostiquer un adénocarcinome de la prostate sans biopsie. Cette méthode consiste à

20 mesurer, dans le sérum ou dans le sang des patients, la quantité totale de PSA. Si cette valeur est comprise entre 2,5 et 20 ng/ml, on mesure également la concentration de PSA libre. On calcule ensuite le ratio PSA libre sur PSA total. Si ce ratio est inférieur à 7%, le diagnostic s'oriente vers un adénocarcinome de la prostate.

Toutefois, l'utilisation d'un seuil à 7%, pour le diagnostic d'un cancer de la prostate,

25 est controversée par de nombreux auteurs, comme le montre la publication de Lein *et al.* "Relation of free PSA/total PSA in serum for differentiating between patients with prostatic cancer and benign prostate hyperplasia : which cutoff should be used ?". Dans ce document publié dans la revue Cancer Investigation, 16(1), 45-49, 1998, il a été démontré qu'il est difficile, par le biais de ce ratio, de différencier systématiquement un cancer de la prostate d'une

BPH.

Pour ces raisons, la demanderesse s'est intéressée, dans la demande de brevet WO00/02052, à la présence dans le sérum de formes clivées du PSA parmi les formes libres du PSA. Les formes moléculaires de PSA sérique de patients atteints de cancer ou de BPH ont
5 été cartographiées par électrophorèse bidimensionnelle, associée à une détection par chimioluminescence, afin d'observer l'ensemble des formes de PSA c'est-à-dire les formes libres, dont les formes clivées, et les formes complexées.

Les profils d'électrophorèse de sérums de sujets atteints d'adénocarcinome de la prostate sont relativement homogènes, présentant essentiellement les formes libres non clivées
10 du PSA, tandis que ceux de sujets atteints de BPH peuvent comporter une proportion relativement importante de formes libres clivées et des spots légèrement plus basiques sans forme clivée. L'augmentation du ratio PSA libre sérique sur PSA total sérique observée chez les patients atteints de BPH serait donc essentiellement liée à l'existence de PSA libre clivé, qui pourrait être enzymatiquement inactif et donc incapable de se lier à l'ACT, ainsi qu'à la présence
15 d'une forme de PSA libre légèrement plus basique que la forme PSA libre active, qui pourrait correspondre à la forme zymogène, inactive, du PSA.

En fonction de ces observations, la demanderesse a décrit des méthodes de diagnostic d'adénocarcinome de la prostate comprenant la quantification, après séparation par électrophorèse bidimensionnelle, du PSA libre clivé et/ou non clivé et l'utilisation de ces valeurs
20 afin d'établir un diagnostic.

Toutefois, même si ces méthodes ont permis d'améliorer le diagnostic, elles requièrent la mise en œuvre d'électrophorèse bidimensionnelle. Elles sont par conséquent assez coûteuses et nécessitent beaucoup de temps de manipulation.

Pour éviter ces manipulations, il a été décrit dans la demande de brevet
25 WO01/77180 de nouveaux anticorps dirigés spécifiquement contre le PSA libre inactif, ainsi que leur utilisation dans un procédé de diagnostic de pathologie bénigne de la prostate ou de l'adénocarcinome de la prostate.

La Demanderesse a maintenant découvert qu'il existait dans les échantillons biologiques de patient, parmi les formes libres du PSA, une nouvelle forme de PSA qui n'est

pas la forme zymogène (ProPSA) mais est aussi activable, c'est-à-dire qui a potentiellement la capacité de réagir avec les inhibiteurs de protéase, et que l'utilisation de la détection d'une telle forme libre de PSA activable permettait un diagnostic différentiel entre des sujets atteints de pathologies bénignes de la prostate et des sujets atteints d'adénocarcinome de la prostate avec
5 une excellente spécificité et sensibilité.

Ainsi la présente invention a pour objet un procédé de diagnostic *in vitro* d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape de détection, dans un échantillon biologique issu d'un patient suspecté d'être atteint d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate, de la
10 forme libre activable du PSA.

Les différentes formes du PSA, présentes dans les fluides biologiques tels que le liquide séminal ou le sérum d'un patient, ont souvent eu des dénominations différentes suivant les auteurs. Tous s'accordent à considérer que le PSA total se trouvent sous deux formes que sont la forme libre (PSA libre) et la forme complexée avec des inhibiteurs de protéase tels que
15 l'ACT (PSA complexé). Le PSA libre peut également être dénommé suivant sa taille : lors de sa production sous forme de ProPSA, il possède des acides aminés supplémentaires (7 ou 5 ou 4 ou 2). On parle alors de PSA zymogène ou de ProPSA-7, ProPSA-5, etc. Ce proPSA, après maturation et donc perte de ses acides aminés supplémentaires, peut se retrouver soit sous forme intacte, soit sous forme partielle. Dans ce dernier cas, on parle de PSA tronqué ou
20 clivé. Le PSA libre sous forme intacte peut également être dénaturé (glycosylé ou déglycosylé); on parle alors de forme dénaturée. Ainsi, les formes de PSA libres comprennent le PSA zymogène, le PSA intact, dénaturé ou non, et le PSA clivé.

On parle aussi, pour ces différentes formes libres ou complexées de PSA, de formes actives et de formes inactives. Par forme active, on entend les formes étant capables de
25 se lier aux inhibiteurs de protéase, tels que l'ACT. Par forme inactive, on entend les formes incapables d'une telle capacité de liaison. On sait que le PSA complexé est inactif puisqu'il s'est déjà lié à un inhibiteur. De même, le PSA libre clivé et le PSA libre dénaturé sont inactifs car ils ne possèdent plus la capacité de se lier aux inhibiteurs. Enfin, les formes du PSA zymogène sont inactives. Les autres formes libres de PSA sont donc actives. Alors que dans le liquide séminal

ou dans des surnageants de la lignée cellulaire LnCaP ces formes actives sont présentes, il est couramment admis que ces formes actives n'existent pas dans le sérum car complexées aux inhibiteurs de protéase.

La Demanderesse a maintenant mis en évidence, contre toute attente, que parmi
5 ces formes libres existait, dans les échantillons biologiques des patients, une forme libre activable, c'est-à-dire ayant encore la capacité de se lier aux inhibiteurs de protéase dans le sérum, cette liaison pouvant être mise en œuvre après activation de ladite forme libre activable. Elle a également mis en évidence que l'utilisation du dosage d'une telle forme de PSA libre activable permettait le diagnostic de patients atteints de l'adénocarcinome de la prostate ou
10 d'une BPH.

Sans vouloir être lié à une théorie, la Demanderesse pense que cette forme libre activable de PSA serait, après activation, équivalente à la forme de PSA qui se complexe à l'ACT. Cette forme libre activable serait une forme de PSA « fermée », emprisonnant le site de fixation à l'ACT, son activation permettant de transformer la forme « fermée » en forme
15 « ouverte » et libérer ainsi le site de fixation.

Le procédé de diagnostic de l'invention peut être mis en œuvre soit en utilisant un partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable, soit un partenaire de liaison capable de se lier au PSA libre activable de manière non spécifique.

Ainsi, selon un premier mode de réalisation, l'invention concerne un procédé de
20 diagnostic *in vitro* d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à :

i) mettre en contact un partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable avec un échantillon biologique issu d'un patient suspecté d'être atteint d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate,

25 ii) mettre en évidence la capture de la forme libre activable du PSA par ledit partenaire de liaison,

iii) calculer le rapport entre la quantité de forme libre activable de PSA détectée dans l'étape ii) et la quantité d'une forme de PSA autre que la forme libre activable, présente dans un échantillon de même nature prélevé chez le même sujet, et

iv) déterminer si les patients sont affectés par un adénocarcinome de la prostate ou par une pathologie bénigne de la prostate en comparant la valeur du rapport déterminé dans l'étape iii) à une valeur-seuil prédéterminée, choisie selon le type de rapport utilisé et représentative de la limite de détection de chaque pathologie.

5 La Demanderesse a découvert que, de façon inattendue, parmi les partenaires de liaison appropriés aux fins de l'invention, ceux reconnaissant l'épitope mimé par la séquence SEQ ID N°1 (DTPYPWGWLLDEGYD) étaient capables effectivement de se lier spécifiquement dans le sérum à cette forme libre activable de PSA sans se lier ni au PSA libre dénaturé ou clivé, ni au ProPSA, et que l'utilisation de cette propriété particulière permettait
10 d'obtenir un procédé de diagnostic des pathologies liées à la prostate très sensible et très spécifique.

Les échantillons biologiques dans lesquels le procédé de l'invention est mis en œuvre sont tout échantillon biologique susceptible de contenir du PSA. A titre d'exemple de tels échantillons, on peut citer le liquide séminal, le sang, le sérum, le plasma et les urines, le sérum et
15 le plasma étant particulièrement préférés.

Les partenaires de liaison capables de se lier spécifiquement au PSA libre activable appropriés aux fins de l'invention comprennent par exemple les anticorps, les fragments d'anticorps et les mimotopes, ainsi que tout autre partenaire connu de l'homme du métier pour avoir cette capacité.

20 Par fragments d'anticorps, on entend en général dans la présente demande, tout fragment d'anticorps ayant conservé la spécificité de l'anticorps d'origine, dans le cas présent la capacité de se lier spécifiquement au PSA libre activable, et en particulier des fragments de type Fab et F(ab')₂. Dans la présente demande, le mot "anticorps" désigne par la suite également des fragments d'anticorps lorsque le sens le permet.

25 Les anticorps utiles au sens de l'invention comprennent notamment les anticorps polyclonaux purifiés et les anticorps monoclonaux.

La préparation des anticorps polyclonaux et des anticorps monoclonaux est largement connue de l'homme du métier et le principe de cette préparation est rappelée ci-après.

Les anticorps polyclonaux peuvent être obtenus par immunisation d'un animal avec au moins un antigène cible d'intérêt, suivie de la récupération des anticorps recherchés sous forme purifiée, par prélèvement du sérum dudit animal, et séparation desdits anticorps des autres constituants du sérum, notamment par chromatographie d'affinité sur une colonne sur laquelle est fixé un antigène spécifiquement reconnu par les anticorps, notamment un antigène cible d'intérêt.

Les anticorps monoclonaux peuvent être obtenus par la technique des hybridomes dont le principe général est rappelé ci-après.

Dans un premier temps, on immunise un animal, généralement une souris, (ou des cellules en culture dans le cadre d'immunisations *in vitro*) avec un antigène cible d'intérêt, dont les lymphocytes B sont alors capables de produire des anticorps contre ledit antigène. Ces lymphocytes producteurs d'anticorps sont ensuite fusionnés avec des cellules myélomateuses "immortelles" (murines dans l'exemple) pour donner lieu à des hybridomes. A partir du mélange hétérogène des cellules ainsi obtenu, on effectue alors une sélection des cellules capables de produire un anticorps particulier et de se multiplier indéfiniment. Chaque hybridome est multiplié sous la forme de clone, chacun conduisant à la production d'un anticorps monoclonal dont les propriétés de reconnaissance vis-à-vis de l'antigène tumoral d'intérêt pourront être testées par exemple en ELISA, par immunotransfert en une ou deux dimensions, en immunofluorescence, ou à l'aide d'un biocapteur. Les anticorps monoclonaux ainsi sélectionnés, sont par la suite purifiés notamment selon la technique de chromatographie d'affinité décrite ci-dessus.

Par mimotopes, on entend tout peptide synthétique ou recombinant capable de mimer une conformation interagissant spécifiquement avec le dit épitope.

Selon un mode de réalisation préféré, le partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable remplit au moins l'une des conditions suivantes :

- il est capable de reconnaître l'épitope mimé par la séquence SEQ ID N°1.
- c'est un anticorps ou un fragment d'anticorps.

La séquence SEQ ID N°1 reconnue par les partenaires de liaison appropriés aux fins de l'invention mime un épitope conformationnel du PSA.

Un exemple d'anticorps capable de reconnaître l'épitope mimé par la séquence

SEQ ID N° 1 approprié aux fins de l'invention est l'anticorps 5D3D11, tel que décrit dans Michel S., et al., 1999, Clinical Chemistry, 45(5) : 638-650. L'utilisation de cet anticorps particulier dans le procédé de l'invention est inattendue en ce sens que cet article indique que cet anticorps est capable d'inhiber l'activité enzymatique du PSA et donc la fixation d'ACT, en
5 d'autres termes qu'il n'est capable que de se lier à une forme libre active du PSA « ouverte ». Dans le cas présent, la Demanderesse a aussi montré qu'il était capable de se lier à la forme libre activable, c'est-à-dire « fermée ».

Les conjugués constitués du partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable et de la forme libre activable du PSA sont nouveaux et constituent
10 également un objet de l'invention.

Selon un mode de réalisation ledit partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable du conjugué de l'invention est un partenaire de liaison capable de reconnaître l'épitope mimé par la séquence SEQ ID N°1.

La deuxième étape du procédé de diagnostic de l'invention consiste à mettre en
15 évidence la capture de ladite forme libre activable de PSA par ledit partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable.

Cette étape peut être mise en œuvre directement en détectant la liaison entre ledit partenaire de liaison et ladite forme libre activable de PSA, ou bien après élution de ladite forme libre activable de PSA immunocapturée par ledit partenaire de liaison. La forme libre activable
20 du PSA immunocapturée par ledit partenaire de liaison, puis éluée sera appelée dans la suite PSA libre activable immunopurifié.

L'élution de la forme libre activable de PSA immunocapturée par ledit partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable peut être mise en œuvre par tout procédé d'élution connu de l'homme du métier, tel qu'un choc de pH. De préférence, on
25 utilise un choc acide, par exemple en utilisant un tampon glycine 0,1M pH 2,8.

La détection de la capture de ladite forme libre activable de PSA, qu'elle soit immunopurifiée ou non, peut être réalisée par tout moyen de détection connu dans le domaine des immunodosages, tel que la détection directe et la détection indirecte.

Dans le cas de la détection indirecte, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un

partenaire de détection, on utilise un partenaire de détection capable de se lier à la forme libre activable du PSA. Ce partenaire de détection se lie sur un épitope différent de celui utilisé par ledit partenaire de liaison utilisé dans l'étape i) lorsque le PSA libre activable n'est pas immunopurifié. A titre de partenaire de détection approprié à cette fin, on peut citer les anticorps tels que les anticorps anti-PSA total, ce qui constitue un mode de réalisation de l'invention.

Des exemples de tels anticorps anti-PSA capables de reconnaître un épitope différent de celui utilisé par ledit partenaire de liaison utilisé dans l'étape i) sont décrits dans l'article de Michel S., et al (1999, *supra*).

Ces partenaires de détection peuvent être préalablement marqués.

Par marquage, on entend la fixation d'un marqueur capable de générer directement ou indirectement un signal détectable. Une liste non limitative de ces marqueurs consiste en :

- les enzymes qui produisent un signal détectable par exemple par colorimétrie, fluorescence, luminescence, comme la peroxydase de raifort, la phosphatase alcaline, l'acétylcholine estérase, la β -galactosidase, la glucose-6-phosphate déshydrogénase,
- les chromophores comme les composés luminescents, colorants,
- les molécules radioactives comme le ^{32}P , le ^{35}S ou le ^{125}I ,
- les molécules fluorescentes telles que la fluorescéine, la rhodamine, l'alexa ou les phycocyanines, et
- les particules telles que les particules en or, en latex magnétique, les liposomes.

Des systèmes indirects de marquage peuvent être aussi utilisés, comme par exemple par l'intermédiaire d'un autre couple ligand/anti-ligand. Les couples ligand/anti-ligand sont bien connus de l'homme du métier, et on peut citer par exemple les couples suivants : biotine/streptavidine, haptène/anticorps, antigène/anticorps, peptide/anticorps, sucre/lectine, polynucléotide/complémentaire du polynucléotide. Dans ce cas, c'est le ligand qui est lié au partenaire de liaison. L'anti-ligand peut être détectable directement par les marqueurs décrits au paragraphe précédent ou être lui-même détectable par un ligand/anti-ligand.

Ces systèmes indirects peuvent conduire, dans certaines conditions, à une amplification du signal. Cette technique d'amplification du signal est bien connue de l'homme du

métier, et l'on pourra se reporter aux demandes de brevet antérieures FR98/10084 ou WO95/08000 de la Demanderesse ou à l'article J. Histochem. Cytochem., (1997), 45 : 481-491.

La détection directe de la capture de la forme libre activable par ledit partenaire de
5 liaison, c'est-à-dire sans l'intermédiaire d'un partenaire de détection, peut être mise en œuvre par exemple par résonance plasmon ou par voltamétrie cyclique sur une électrode portant un polymère conducteur.

La détection directe peut également être mise en œuvre en utilisant la propriété
particulière d'activité enzymatique des formes actives du PSA. Dans ce cas, il conviendra de
10 procéder à l'activation de la forme libre activable du PSA, le cas échéant après son immunopurification. En effet, l'activation de cette forme libre activable permet de libérer le site de liaison au substrat enzymatique, lequel pourra ensuite être mis à réagir avec un substrat enzymatique. Ainsi, la détection est mise en œuvre par détermination de l'activité enzymatique de la forme libre du PSA immunopurifiée et activée, ce qui constitue un mode de réalisation
15 particulier de l'invention.

Des exemples de substrats enzymatiques qui conviennent aux fins de l'invention comprennent tous les substrats révélateurs de l'activité protéase de type chymotrypsique largement connus de l'homme du métier. De tels substrats sont disponibles par exemple chez Enzyme System Products. Ils sont composés d'une séquence peptidique reconnue et clivée par
20 le PSA, cette séquence étant couplée à un groupement chromophore ou fluorophore.

L'activation de la forme libre activable du PSA peut être mise en œuvre par au moins l'une des méthodes suivantes :

- mise en contact de ladite forme activable avec un milieu de forte concentration saline, d'au moins 0,15M, de préférence d'au moins 1M, de préférence encore d'au plus 2M,

25 - liaison du PSA libre activable immunopurifié à un anticorps capable d'augmenter l'activité enzymatique du PSA,

ces deux méthodes pouvant être mises en œuvre séparément, simultanément ou successivement, selon n'importe quel ordre.

A titre de milieu de forte concentration saline, on peut citer les milieux contenant du

NaCl 1,5M et à titre d'anticorps capable d'augmenter l'activité enzymatique du PSA, on peut citer l'anticorps 8G8F5 (bioMérieux, France).

Du fait de la propriété particulière de ces anticorps capables d'augmenter l'activité enzymatique du PSA, leur utilisation dans le procédé de l'invention permet d'améliorer la sensibilité dudit procédé.

Ainsi, selon un mode de réalisation, le procédé de l'invention est caractérisé en ce qu'il utilise, outre le partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable, un anticorps capable d'augmenter l'activité enzymatique du PSA, et notamment l'anticorps 8G8F5.

Cet anticorps capable d'augmenter l'activité enzymatique du PSA peut être utilisé à titre de partenaire de capture dans un dosage de type ELISA lorsque le partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable est utilisé pour immunopurifier le PSA libre activable. Il peut également être utilisé en tant que partenaire de détection, notamment lorsque le partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable est utilisé comme partenaire de capture.

Les conjugués constitués du partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable, tel qu'un partenaire de liaison capable de reconnaître l'épitope mimé par la séquence SEQ ID N°1, et de la forme libre activable du PSA, laquelle est activée, sont également nouveaux et constituent un mode de réalisation particulier de l'invention.

Dans le procédé de l'invention, les partenaires de liaison capables de se lier spécifiquement au PSA libre activable, se liant spécifiquement au PSA libre activable, peuvent être utilisés tels quels ou bien notamment sous forme fixés sur un support solide et/ou liés à un marqueur.

La fixation de ces partenaires de liaison sur un support solide est bien connue. Le support peut être réalisé avec tout matériau solide, biologique ou synthétique, doué de propriétés adsorbantes ou capables de fixer un agent de couplage. Des matériaux sont connus et décrits dans la littérature. Parmi les matériaux solides capables de fixer ces partenaires de liaison par adsorption, on citera par exemple le polystyrène, le polypropylène, les latex, etc. Parmi les matériaux permettant de fixer ces partenaires de liaison par covalence à l'aide d'un

agent de couplage, on peut citer notamment le dextrane, la cellulose, etc. Le support peut se présenter par exemple sous forme de disques, de tubes, de billes, de cônes ou de plaques, en particulier de plaques de microtitrage.

La liaison des partenaires de liaison à un marqueur permettra également d'obtenir
5 une détection directe, comme décrit précédemment. Ce marqueur est tel que décrit précédemment.

Lorsque le partenaire de liaison n'est pas lié à un support ou lorsque le PSA libre activable est immunopurifié, le procédé de l'invention peut également mettre en œuvre un partenaire de capture. Dans le premier cas, ce partenaire de capture est capable de se lier à un
10 épitope différent de celui reconnu par le partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable.

Des exemples de partenaire de capture comprennent les anticorps anti-PSA, tels que décrits précédemment.

Dans la mesure où on utilise dans le procédé de l'invention à la fois un partenaire
15 de capture et à la fois un partenaire de détection pour doser le PSA libre activable, ces partenaires se lient à des épitopes différents, eux-mêmes étant différents de l'épitope reconnu par le partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable lorsque le PSA libre activable n'a pas été immunopurifié.

Les procédés mettant en œuvre les différents partenaires de la forme activable de
20 PSA pour la mise en évidence de la capture de la forme libre activable du PSA par ledit partenaire de liaison sont largement connus de l'homme du métier. A titre d'exemple, on peut citer les méthodes de type sandwich telle que la méthode ELISA, et les méthodes de dosage par compétition.

L'étape iii) du procédé de l'invention consiste à calculer le rapport entre la quantité
25 de forme libre activable de PSA détectée dans l'étape ii) et la quantité d'une forme de PSA autre que ladite forme activable de l'invention, présente dans un échantillon de même nature prélevé chez le même sujet.

Par l'expression "échantillon de même nature prélevé chez le même sujet", on entend soit deux fractions d'un même prélèvement, soit deux échantillons issus de deux

prélèvements différents mais qui doivent être de même nature, par exemple des échantillons sériques.

Les formes autres que la forme libre activable du PSA sont notamment le PSA complexé, le PSA total, le PSA libre total, le PSA libre zymogène, le PSA libre dénaturé, le
5 PSA libre clivé et leurs associations, c'est-à-dire l'ensemble des formes actives ou inactives, libres ou complexées, du PSA.

Le dosage de chacune de ces différentes formes notamment à l'aide d'anticorps spécifiques, est connu.

Le PSA complexé est dosé par exemple à l'aide d'anticorps décrits dans la
10 demande de brevet WO98/22509.

Le PSA total est dosé par exemple à l'aide d'anticorps décrits par H. Nagasaki et al. (1999), Clin. Chem. 45 : 4486-496.

D'autres anticorps capables de se lier à différentes formes du PSA libre, dont le PSA libre total, sont commercialisés par Chugai (Japon), BiosPacific (Emeryville, CA) et
15 Euromedex US Biological (Swampscott, MA).

La quantification est effectuée de façon connue à partir des procédés de mise en évidence de la détection de réactions immunologiques tels que décrits ci-dessus (sandwich, etc.), par exemple en déterminant la quantité de marqueur lorsqu'on utilise le marquage.

Bien entendu, lorsque les quantités mesurées sont destinées à être comparées, il
20 convient que ces valeurs soient comparables. En d'autres termes, il convient que les valeurs mesurées soient rapportées à une même dilution ou concentration éventuelle de l'échantillon ainsi qu'à un même volume.

Les différents rapports qui peuvent être calculés dans l'étape iii) du procédé de l'invention peuvent être choisis parmi les suivants :

- 25
- quantité de PSA libre activable/quantité de PSA total,
 - quantité de PSA libre activable/quantité de PSA libre total,
 - quantité de PSA libre activable/quantité de PSA complexé,
 - quantité de PSA libre activable/quantité de PSA libre clivé,
 - quantité de PSA libre activable/quantité de PSA libre zymogène,

- quantité de PSA libre activable/quantité de PSA libre dénaturé,
 - quantité de PSA libre activable/quantité de (PSA libre dénaturé + PSA libre zymogène),
 - quantité de PSA libre activable/quantité de (PSA libre dénaturé + PSA libre clivé),
 - quantité de PSA libre activable/quantité de PSA libre inactif (zymogène, dénaturé et clivé)
- 5 - les inverses de ces rapports, ou
- des combinaisons de ces rapports,

 les rapports préférés étant relatifs à la quantité de PSA libre activable sur la quantité de (PSA libre dénaturé + PSA libre clivé) ou la quantité de PSA libre activable sur la quantité de PSA libre inactif.

- 10 Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, la forme de PSA autre que la forme libre activable utilisée pour calculer le rapport dans l'étape (iii) du procédé de l'invention est la forme de PSA libre dénaturé + la forme de PSA libre clivé ou la forme de PSA libre inactif.

 La mise en œuvre de ce calcul se fait bien évidemment comme suit :

- 15 - on évalue la quantité de PSA libre activable dans un échantillon biologique prélevé chez un sujet, en utilisant le partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable, comme décrit précédemment,
- on évalue l'une des quantités choisies parmi la quantité de PSA total, la quantité de PSA libre total, la quantité de PSA complexé, la quantité de PSA libre zymogène, la quantité de PSA libre
- 20 clivé, la quantité de PSA libre dénaturé, la quantité de PSA libre dénaturé + PSA libre clivé, la quantité de PSA libre dénaturé + PSA libre zymogène et la quantité de PSA libre inactif, ou leurs associations, sur un échantillon de même nature prélevé chez le même sujet, et
- on détermine ledit rapport ou ledit rapport inverse, ou ladite combinaison de rapports.

- L'étape iv) du procédé de l'invention consiste à déterminer si les patients sont
- 25 affectés par un adénocarcinome de la prostate ou par une pathologie bénigne de la prostate en comparant la valeur du rapport déterminé dans l'étape iii) à une valeur-seuil prédéterminée, choisie selon le type de rapport utilisé et représentative de la limite de détection de chaque pathologie.

 On sait que, de façon générale, les résultats des tests immunologiques dépendent

en grande partie des caractéristiques de spécificité et d'affinité des anticorps utilisés, et que ces caractéristiques influent sur les valeurs mesurées avec ces anticorps. On conçoit donc qu'il n'est pas possible de donner des valeurs-seuils précises et que des valeurs-seuils adaptées à chaque anticorps utilisé peuvent être déterminées dans chaque cas par de simples expériences de routine.

Il faut bien comprendre que l'on appelle ici valeur-seuil soit une valeur discrète, soit un intervalle de valeurs correspondant à une zone d'indétermination. Bien évidemment, lorsque la valeur mesurée est incluse dans l'intervalle d'indétermination, ou est très proche de la valeur-seuil dans le cas d'une valeur discrète, on ne peut pas conclure définitivement et il convient de conduire des investigations supplémentaires.

Bien entendu, quand on a déterminé une valeur-seuil pour un type de rapport donné, on peut en déduire des valeurs-seuils correspondant à d'autres types de rapports.

Dans le cas où on considère un rapport PSA libre activable/(PSA libre dénaturé + PSA libre clivé) ou un rapport PSA libre activable/PSA libre inactif, on diagnostiquera un adénocarcinome de la prostate pour les patients ayant un rapport supérieur à la valeur-seuil obtenue à partir dudit rapport, et on diagnostiquera une BPH ou autre pathologie prostatique non cancéreuse (« patients normaux ») pour les patients ayant un rapport inférieur à cette valeur-seuil.

D'une façon générale, lorsque la quantité de PSA libre activable se trouvera au numérateur du rapport calculé, on diagnostiquera un adénocarcinome de la prostate pour les patients ayant un rapport supérieur à la valeur-seuil obtenue à partir dudit rapport, et on diagnostiquera une BPH ou autre pathologie prostatique non cancéreuse (« patients normaux ») pour les patients ayant un rapport inférieur à cette valeur-seuil. En revanche, lorsque la quantité de PSA libre activable se trouvera au dénominateur du rapport calculé, on diagnostiquera un adénocarcinome de la prostate pour les patients ayant un rapport inférieur à la valeur-seuil obtenue à partir dudit rapport, et on diagnostiquera une BPH ou autre pathologie prostatique non cancéreuse (« patients normaux ») pour les patients ayant un rapport supérieur à cette valeur-seuil.

Pour mettre en œuvre le procédé de l'invention, l'invention a également pour objet

un kit de diagnostic permettant de diagnostiquer un adénocarcinome de la prostate ou une pathologie bénigne de la prostate, ledit kit comprenant :

- un partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable, de préférence un partenaire de liaison capable de reconnaître l'épitope mimé par la séquence SEQ ID N°1, de préférence encore un anticorps ou un fragment d'anticorps, et,
- des moyens pour doser les formes de PSA autres que la forme libre activable, de préférence des anticorps ou fragments d'anticorps.

De tels moyens utilisables dans ledit kit sont tels que décrits précédemment pour le dosage de la forme de PSA que l'on souhaite quantifier.

Le procédé de l'invention peut également être mis en œuvre en utilisant un partenaire de liaison capable de se lier au PSA libre activable de manière non spécifique.

De tels partenaires peuvent être des partenaires capables de se lier avec le PSA total, dont notamment le PSA libre activable. A titre d'exemple de tels partenaires, on peut citer les anticorps, les fragments d'anticorps et les mimotopes, ainsi que tout autre partenaire connu de l'homme du métier pour avoir cette capacité, comme décrit précédemment, et notamment l'anticorps 11E5C6 (Michel et al., 1999, supra), dont l'épitope conformationnel implique la région C-terminale du PSA (Michel S et al., 2001, J. Mol. Recognit., 14 : 406-413).

Ce partenaire de liaison capable de se lier au PSA libre activable de manière non spécifique peut être utilisé dans le procédé de l'invention comme décrit précédemment avec le partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable, à savoir comme partenaire de capture ou bien pour immunopurifier le PSA libre.

Toutefois, dans ce mode de réalisation particulier, la détection de la forme libre activable du PSA doit être mise en œuvre en utilisant la propriété particulière d'activité enzymatique des formes actives du PSA. Dans ce cas, il conviendra de procéder à l'activation de la forme libre activable du PSA. En effet, l'activation de cette forme libre activable permet de libérer le site de liaison au substrat enzymatique, lequel pourra ensuite être mis à réagir avec un substrat enzymatique tel que décrit précédemment. Ainsi, la détection est mise en œuvre par détermination de l'activité enzymatique de la forme libre du PSA activée.

Ainsi, selon ce mode de réalisation, l'invention concerne un procédé de diagnostic

d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à :

i) mettre en contact un partenaire de liaison capable de se lier au PSA libre activable de manière non spécifique, avec un échantillon biologique issu d'un patient suspecté d'être atteint d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate,

ii) mettre en évidence la capture de la forme libre activable du PSA par ledit partenaire de liaison par détermination de l'activité enzymatique de la forme libre du PSA activée, après activation de la forme libre activable du PSA,

iii) calculer le rapport entre la quantité de forme libre activable de PSA détectée dans l'étape ii) et la quantité d'une forme de PSA autre que la forme libre activable, présente dans un échantillon de même nature prélevé chez le même sujet, et

iv) déterminer si les patients sont affectés par un adénocarcinome de la prostate ou par une pathologie bénigne de la prostate en comparant la valeur du rapport déterminé dans l'étape iii) à une valeur-seuil prédéterminée, choisie selon le type de rapport utilisé et représentative de la limite de détection de chaque pathologie.

L'activation de la forme libre activable du PSA peut être mise en œuvre par au moins l'une des méthodes suivantes :

- mise en contact de ladite forme activable avec un milieu de forte concentration saline, d'au moins 0,15M, de préférence d'au moins 1M, de préférence encore d'au plus 2M, comme décrit précédemment,
- liaison du PSA libre activable à un anticorps capable d'augmenter l'activité enzymatique du PSA, et notamment l'anticorps 8G8F5,

ces deux méthodes pouvant être mises en œuvre séparément, simultanément ou successivement, selon n'importe quel ordre.

Du fait de la propriété particulière de ces anticorps capables d'augmenter l'activité enzymatique du PSA, leur utilisation dans le procédé de l'invention permet d'améliorer la sensibilité dudit procédé, ce qui constitue un mode de réalisation préféré.

Ainsi, selon ce mode de réalisation, le procédé de l'invention est caractérisé en ce qu'il utilise, outre le partenaire de liaison capable de se lier au PSA libre activable de manière

non spécifique, un anticorps capable d'augmenter l'activité enzymatique du PSA, et notamment l'anticorps 8G8F5.

Cet anticorps capable d'augmenter l'activité enzymatique du PSA peut être utilisé à ce titre, dans un dosage, comme partenaire de capture du PSA libre activable précédemment immunopurifié de manière spécifique ou non spécifique à partir d'échantillons biologiques. Le PSA libre ainsi activé après sa capture par l'anticorps sera détecté par son activité enzymatique qui sera mesurée par l'intermédiaire d'une cinétique d'hydrolyse d'un substrat fluorescent. La pente de la cinétique sera exprimée en unité de fluorescence. La correspondance en quantités de PSA sera obtenue grâce à une courbe étalon établie avec des quantités de PSA actif. entre

A l'exception de ce qui précède, les étapes i) à iv) de ce mode de réalisation particulier sont telles que décrites précédemment.

La présente invention sera mieux comprise à l'aide des exemples suivants donnés uniquement à titre illustratif et non limitatif, ainsi qu'à l'aide des figures 1 à 6 annexées, sur lesquelles :

- la figure 1 montre la photographie de 3 gels d'électrophorèse bidimensionnelle obtenue à partir de 0,5 µg de PSA issu du surnageant de culture des cellules LNCaP immunopurifié avec les anticorps 5D3D11 (photographie A), 6C8D8 (photographie B) et 11E5C6 (photographie C),

- la figure 2 représente un graphe de standardisation donnant la fluorescence en fonction de la concentration en PSA obtenu en utilisant du PSA séminal précédemment immunopurifié avec l'anticorps 5D3D11 et dosé en PSA total,

- la figure 3 est une représentation graphique donnant les valeurs des rapports PSA activable/(PSA libre clivé + PSA libre dénaturé) obtenues avec le procédé de l'invention pour des sérum de patients atteints de cancer de la prostate et traités par radiothérapie (RT), par hormonothérapie (HT) ou par prostatectomie (PR), de patients atteints de cancer mais dont on ne connaît pas le traitement (autres), de patients atteints d'hyperplasies bénignes (BPH) et de patients normaux (PN) (partie A du graphe), ainsi que les valeurs des rapports PSA libre/PSA total obtenu selon un procédé de l'art antérieur (partie B du graphe) avec ces mêmes sérums,

- la figure 4 est une représentation graphique donnant les valeurs des rapports PSA

activable/(PSA libre clivé + PSA libre dénaturé) obtenues avec le procédé de l'invention dans les sérums ayant un rapport PSA libre/PSA total compris entre 0,15 et 0,25, les sérums étant issus de patients atteints de cancer de la prostate et traités par radiothérapie (RT), par hormonothérapie (HT) ou par prostatectomie (PR), de patients atteints de cancer mais dont on ne connaît pas le traitement (autres), de patients atteints d'hyperplasies bénignes (BPH) et de patients normaux (PN),

- la figure 5 est une représentation graphique donnant les valeurs des rapports PSA activable/(PSA libre clivé + PSA libre dénaturé) pour les sérums de patients atteints de cancer de la prostate et de patients atteints d'hyperplasies bénignes (BPH), dont le taux de PSA total est inférieur à 2,5 ng/ml, et

- la figure 6 est une représentation graphique donnant les valeurs des rapports PSA activable/(PSA libre clivé + PSA libre dénaturé) pour les sérums de patients atteints de cancer de la prostate et de patients atteints d'hyperplasies bénignes (BPH), obtenues avec l'anticorps 5D5A5 ou l'anticorps 11E5C6 comme anticorps de détection du PSA activable.

Exemple 1 : Détection de la forme libre activable du PSA à partir de surnageants de LNCaP

1.1 Préparation des surnageants de LNCaP

On a fait synthétiser du PSA par la lignée cellulaire LNCaP selon la technique décrite dans les articles "LNCaP Produces both putative zymogen and inactive, free form of prostate specific antigen" E. Corey et al., 1998, Prostate 35:135-143, "Androgen-Sensitive human prostate cancer cell, LNCaP, Produce both N-terminally mature and tuncated prostate specific antigen isoform" A. Herrala et al., 1997, Eur. J. Biochem. 255:329-335, "Production of miligram concentration of free prostate specific antigen (fPSA) from LNCaP cell culture : Difference between fPSA from LNCaP cell and seminal plasma." J. T. Wu et al., 1998, J. Clin. Lab. Anal. 12 : 6-13.

Le PSA ainsi produit par la lignée cellulaire LNCaP est composé de PSA libre. De plus, comme la culture de la lignée est réalisée en présence de sérum de veau foetal, qui contient de l'ACT, une proportion de complexe PSA-ACT est ainsi également présente.

1.2 Liaison des formes libres du PSA du surnageant par des anticorps de liaison

On a utilisé soit l'anticorps 5D3D11, qui est un partenaire de liaison reconnaissant l'épitope mimé par la séquence SEQ ID N°1, soit l'anticorps 6D8C8 qui est un partenaire de liaison ne reconnaissant pas cet épitope (Michel S., et al., 1999, *supra*).

5 On a procédé à la liaison comme suit :

Les anticorps 5D3D11 ou 6C8D8 ont été fixés sur un support résine de sepharose activée au CNBr (Pharmacia) selon le protocole classique fourni par le fabricant, bien connu de l'homme de métier. Le rapport de couplage utilisé était 5 mg d'anticorps pour 1 ml de résine gonflée. 1 ml de résine ayant fixé 5 mg d'anticorps a été mis en contact avec 200 ml d'un pool
10 de surnageants cellulaires de LNCaP contenant environ 500 µg de PSA total dosé à l'aide de l'appareil de détection Vidas (kit PSA total, bioMérieux, France). Après 2 passages sur la colonne d'affinité, la fraction contenant le PSA non fixé a été conservée (nommée F1), et le PSA fixé par les anticorps a été élué avec un tampon glycine 0,1 M pH 2,8 neutralisé ensuite à pH 7,2 avec du Tris 2 M pH 8. On a ainsi obtenu les formes libres du PSA immunopurifiées
15 soit par l'anticorps 5D3D11, soit l'anticorps 6C8D8.

1.3 Dosage des formes libres de PSA du surnageant après immunopurification par les anticorps 5D3D11 et 6C8D8

1.3.1. Analyse par électrophorèse bidimensionnelle

Le PSA contenu dans les différentes fractions issues de l'immunopurification a été
20 analysé par électrophorèse bidimensionnelle et Western-Blot.

Lors de la séparation selon la première dimension, les protéines migrent en fonction de leur point isoélectrique (pI) par isoélectrofocalisation (IEF) sur un gradient de pH immobilisé sur des bandelettes de dépôt (Immobiline Dry-strip pH 3-10, 18 cm, non linéaire, Pharmacia) en conditions dénaturantes et réductrices. 0,5 µg de PSA ont été ajoutés à 10 µl d'une solution
25 contenant 10% de SDS et 2,3% de DTT (dithio-1,4-thréitol), et le mélange a été chauffé 5 min à 96°C. Puis l'échantillon a été complété à 500 µl avec la solution de réhydratation (urée 8,3 M, thio-urée 2 M, CHAPS 4% (3-[(3-cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfonate), DTT 100 mM, Servalyt 4-9 2%, Orange G 1 mg/ml), et mis en contact avec les bandelettes dans un tube à essai en verre de 20 cm de longueur. L'ensemble a ensuite été recouvert d'huile

de paraffine, et incubé toute la nuit. La séparation a été effectuée sous une tension augmentant de façon linéaire de 100 à 3500 V en 8 h, et une étape de focalisation à 6000 V a été réalisée pendant 80 à 100 kVh.

Les protéines ayant focalisé à leur point isoélectrique ont ensuite été séparées dans
5 une deuxième dimension en fonction de leur taille grâce à une électrophorèse SDS-PAGE, sur un grand gel homogène à 12% d'acrylamide à 40 mA par gel, pendant 5-6 h, selon la technique classique d'électrophorèse de protéines.

Les gels obtenus après séparation selon la seconde dimension ont été transférés sur membrane de PVDF (polyvinylidène trifluorure ; Millipore) en tampon CAPS/méthanol (acide
10 3-[cyclohexilamino]-1-propanesulfonique), pendant 1 nuit sous un courant de 1 A, en maintenant la température à 15°C. Les membranes ont été saturées pendant 1 nuit à 4°C en TBS (Tris Buffer Saline, Tris 15 mM pH 8, NaCl 140 mM) contenant 0,05% de Tween 20 et 5% de lait déshydraté écrémé. L'anticorps anti-PSA 13C9E9, précédemment identifié pour détecter toutes les formes de PSA (Charrier J.P., et al., 2001, Electrophoresis, 22, 1861-
15 1866), a été dilué dans la solution de saturation à 10 µg/ml, et a été ajouté aux membranes. Après une incubation d'1 h à 37°C, les membranes ont été lavées trois fois (5 min) avec une solution de saturation, et mises en contact avec le conjugué anticorps anti-souris couplé à la peroxydase (Jackson ImmunoResearch, West Grove, Etats Unis d'Amérique), dilué au 1/5000° dans la solution de saturation. Elles ont ensuite été incubées 1 h à température ambiante, lavées
20 trois fois en solution de saturation. L'immunoréactivité a été détectée en utilisant un substrat chemiluminescent (Pierce), en incubant les membranes dans le Fluor S, et en faisant une acquisition de l'image (entre 1 min. et 1 h selon l'échantillon). Les images obtenues ont ensuite été traitées à l'aide du logiciel Multi-Analyst (Biorad).

Les photographies de ces gels sont reproduites sur la figure 1 où la photographie A
25 correspond à l'utilisation de l'anticorps 5D3D11, la photographie B correspond à l'utilisation de l'anticorps 6C8D8 et la photographie C correspond à l'anticorps 11E5C6 (Michel S. et al., 1999, *supra*) qui est un anticorps anti-PSA total utilisé à titre comparatif.

Cette figure montre que, par comparaison au PSA immunopurifié avec l'anticorps anti-PSA total 11E5C6, le PSA immunopurifié par l'anticorps 5D3D11 comporte très peu de

formes clivées ou tronquées. En revanche, ces formes sont présentes en proportion beaucoup plus importante dans le PSA immunopurifié avec l'anticorps 6C8D8.

1.3.3 Caractérisation des formes zymogènes et mature du PSA immunopurifié par séquençage N-terminal du PSA

5 5 à 8 µg de PSA cellulaire immunopurifié par les anticorps 5D3D11 ou 6C8D8 ont été soumis à une séparation sur gel SDS-PAGE en conditions réduites et transférés sur membrane de polyvinylidene difluoride (PVDF) selon les techniques bien connues de l'homme du métier. Les bandes de PSA ont été colorées avec une solution de Rouge Ponceau S à 0,25% dans du TCA 3% (acide trichloroacétique), et la bande correspondant au PSA mature
10 (environ 30 kDa) a été découpée et soumise à une dégradation d'Edman sur un séquenceur de protéines Procise 292A (Applied Biosystems).

Les résultats obtenus ont montré que le PSA immunopurifié par l'anticorps 5D3D11 ne contenait que la forme mature (IVGG...), tandis que le PSA immunopurifié par l'anticorps 6C8D8 contenait la forme mature, ainsi que le proPSA(-7) et le proPSA(-5).

1.3.4 Mesure de l'activité enzymatique du PSA cellulaire immunopurifié

15 Les puits d'une plaque ELISA Nunc Maxisorp noire (compatible avec une détection en fluorescence) ont été coatés 2 heures à 37°C avec 100 µl d'une solution de streptavidine à 10 µg/ml en tampon carbonate pH 9,6 et bloqués pendant 2 heures à 37°C avec du TBS (Tris-HCl 50 mM pH 7.5, NaCl 0.15 M) contenant 2 mg/ml de BSA (Bovine Serum
20 Albumine) Après 3 lavages des puits en TBS-Tween 0,05%, 100 µl d'anticorps anti-PSA total biotinylé dilué à 10 µg/ml en TBS-BSA ont été introduits. L'anticorps anti-PSA total peut être soit l'anticorps 11E5C6 qui ne modifie pas l'activité enzymatique du PSA (Michel S. et al., 1999, *supra*), soit l'anticorps 8G8F5 (bioMérieux, France).

Après 2 heures d'incubation à 37°C, les puits ont été lavés avec du TBS-Tween
25 0,05%, et le PSA immunopurifié par les anticorps 5D3D11 ou 6C8D8, dilué en TBS-BSA à 2,5 µg/ml a été introduit et incubé toute la nuit à 4°C. Les puits ont été ensuite lavés à nouveau en TBS-Tween 0,05% et incubés 15 min. soit avec le TBS-BSA décrit ci-dessus (contenant 0,15 M de NaCl), soit avec du TBS-BSA dont la concentration en NaCl a été montée à 1,5 M. Les puits ont ensuite été vidés et mis en contact avec 100 µl du substrat fluorescent Mu-

HSSKLQ-AFC (Enzyme System Products, filiale d'ICN) dilué à 300 μ M en TBS-BSA contenant soit 0,15 M, soit 1,5 M de NaCl. La cinétique enzymatique a été suivie à 37°C pendant 2 heures (excitation 390 nm, émission 510 nm ; 1 mesure / minute) avec le lecteur Fluoroskan (Thermolabs Systems). L'activité enzymatique du PSA correspond à la pente de la courbe obtenue.

Les résultats sont indiqués dans le tableau 1 ci-après :

Tableau 1

	Capture par 11E5C6 biotinylé		Capture par 8G8F5 biotinylé	
	NaCl 0,15 M	NaCl 1,5 M	NaCl 0,15 M	NaCl 1,5 M
Surnageant LNCaP	Non détectable	Non détectable	Non détectable	Non détectable
PSA cell. immunopurifié par 5D3D11	17,1	51,8	79,9	153,1
PSA cell. immunopurifié par 6C8D8	Non détectable	Non détectable	Non détectable	7,0

L'activité enzymatique est exprimée en unités de fluorescence x 1000 / minute.

Ce tableau montre que le PSA immunopurifié par l'anticorps 5D3D11 possède une activité enzymatique détectable. Cette activité est augmentée en présence de NaCl 1,5 M. La capture du PSA par l'anticorps 8G8F5 augmente aussi l'activité enzymatique du PSA.

Le PSA immunopurifié par l'anticorps 6C8D8, quant à lui, n'a qu'une activité résiduelle détectable en présence de NaCl 1,5 M et de l'anticorps 8G8F5, montrant que cette forme de PSA immunopurifiée n'est pas activable.

Cet exemple met en évidence que, parmi les formes libres actives du PSA dans les cellules LNCaP, on trouve la forme libre activable qui est détectable selon le procédé de l'invention.

Exemple 2 : Détection de la forme libre activable du PSA à partir de sérum de patients ayant un adénocarcinome de la prostate

Le pool de sérum utilisé est composé de 30 sérums de patients ayant un cancer de la prostate. Concentration de ce pool en PSA : PSA total : 71 ng/ml ; PSA libre : 12 ng/ml,

déterminée à l'aide de l'appareil Vidas.

2.1. Immunopurification de sérum

On utilise la résine décrite dans le paragraphe 1.2 comme support solide ayant fixé les anticorps 5D3D11 et 6C8D8. 50 µl de ces résines sont mises en contact avec 1 ml du pool de sérum décrit ci-dessus pendant toute une nuit à 4°C sous agitation. Puis les tubes sont centrifugés, la fraction contenant le PSA non fixé a été conservée, la résine a été lavée 3 fois avec du PBS-Tween 0,5% (les fractions de lavages sont regroupées et conservées), puis le PSA fixé par les anticorps 5D3D11 ou 6C8D8 a été élué pendant 5 min avec 200 µl de Glycine 0,1 M PH 2,2 contenant 1 mg/ml de BSA, et neutralisé à pH 7,2 avec du Tris 2 M pH 8.

2.1. Mesure de l'activité enzymatique du PSA immunopurifié à partir de sérum

Les puits d'une plaque ELISA Nunc Maxisorp noire (compatible avec une détection en fluorescence) ont été « coatés » 2 heures à 37°C avec 100 µl d'une solution de streptavidine à 10 µg/ml en tampon carbonate pH 9,6 et bloqués pendant 2 heures à 37°C avec du TBS (Tris-HCl 50 mM pH 7.5, NaCl 0.15 M) contenant 2 mg/ml de BSA (Bovine Serum Albumine). Après 3 lavages des puits en TBS-Tween 0,05%, 100 µl d'anticorps anti-PSA total biotinylé dilué à 10 µg/ml en TBS-BSA ont été introduits. L'anticorps anti-PSA total peut être :

- soit l'anticorps 11E5C6, qui ne modifie pas l'activité enzymatique du PSA,
- soit l'anticorps 8G8F5 qui augmente l'activité enzymatique du PSA capté.

Après 2 heures d'incubation à 37°C, les puits ont été lavés avec du TBS-Tween 0,05%, et 100 µl du PSA immunopurifié à partir de sérum par les anticorps 5D3D11 ou 6C8D8 ont été introduits et incubés toute la nuit à 4°C. Les puits ont ensuite été lavés à nouveau en TBS-Tween 0,05% et incubés 15 min avec du TBS-BSA 2 mg/ml dont la concentration en NaCl a été montée à 1,5 M. Les puits ont ensuite été vidés et mis en contact avec 100 µl du substrat fluorescent Mu-KGISSQY-AFC (Enzyme System Products, filiale d'ICN) dilué à 400 µM en TBS-BSA contenant 1,5 M de NaCl. La cinétique enzymatique a été suivie à 37°C pendant 2 heures (excitation 390 nm, émission 510 nm ; 1 mesure / minute) avec le lecteur Fluoroskan (Thermolabs Systems). L'activité enzymatique du PSA correspond à la pente de la courbe obtenue.

Les résultats sont indiqués dans le tableau 2 ci-après :

Tableau 2

	NaCl 1,5 M	
	11E5C6 biotinylé	8G8F5 biotinylé
Pool de sérum initial	1,0*	4,9*
PSA sérique immunopurifié par 5D3D11	29,5	62,9
PSA sérique immunopurifié par 6C8D8	4,4	11,5

L'activité enzymatique est exprimée en unités de fluorescence x 1000 / minute.

*L'activité mesurée directement à partir du sérum (sans immunopurification) est sous-estimée, car le PSA activé se complexe immédiatement avec l'ACT sérique.

5 Ce tableau montre que l'on est capable de mesurer une activité enzymatique sur du PSA immunopurifié à partir de sérum : le sérum contient donc du PSA libre activable.

On constate toujours bien une différence significative d'activité entre le PSA immunopurifié par l'anticorps 5D3D11 et celui immunopurifié par l'anticorps 6C8D8, montrant que l'anticorps 5D3D11 reconnaît spécifiquement le PSA libre activable.

10

Exemple 3 : Utilisation de l'anticorps 5D3D11 dans un test diagnostique pour la discrimination entre une BPH et l'adénocarcinome de la prostate

Pour le dosage, on a utilisé l'appareil Vidas, adapté pour inclure les réactifs de dosage appropriés, mais utilisé selon les instructions du fournisseur (bioMérieux, France).

15

3.1 Dosage du PSA activable dans des sérums de patients

L'anticorps 5D3D11 est utilisé comme anticorps de capture dans un test de type sandwich. Le PSA capté est détecté par l'anticorps anti-PSA total 5D5A5 couplé à la phosphatase alcaline. Le protocole est tel que décrit précédemment.

20

La standardisation du test a été effectuée selon les recommandations du fournisseur en utilisant du PSA séminal immunopurifié par l'anticorps 5D3D11 et dosé en PSA total. La limite de détection du test est 0,05 ng/ml de PSA actif/ml. La courbe de standardisation dans le domaine de concentration de 0 à 1,5 ng/ml est représentée sur la figure 2. Cette courbe, qui est proche d'une droite, met en évidence que le dosage avec un partenaire de liaison reconnaissant l'épitope mimé par la séquence SEQ ID N°1 permet de détecter du PSA libre activable avec

une bonne sensibilité.

3.2 Dosage du (PSA libre clivé + PSA libre dénaturé) dans des sérums de patients

On a répété le mode opératoire décrit précédemment, à ceci près qu'on a utilisé l'anticorps anti-PSA libre 6C8D8 comme anticorps de capture pour la capture dans le sérum
5 des formes de PSA libre inactif, ainsi que l'anticorps anti-PSA total 11E5C6 couplé à la phosphatase alcaline comme anticorps de détection, lequel reconnaît dans le cas présent les formes de PSA libre clivé et libre dénaturé.

3.3 Utilisation du rapport PSA activable/(PSA libre clivé + PSA libre dénaturé) pour une meilleure discrimination entre un cancer de la prostate et une BPH

10 Une étude rétrospective a été effectuée avec 177 sérums de patients contenant du PSA. Ces sérums correspondent à :

- 89 cancers de la prostate bien identifiés avec les taux de PSA totaux, les grades des tumeurs, les scores de Gleason et des informations éventuelles sur les traitements (radiothérapie, hormonothérapie, prostatectomie ou inconnu) effectués ultérieurement,
- 15 - 65 hyperplasies bénignes,
- 23 prostates normales (ayant des taux de PSA > à 2,5ng/ml mais des biopsies négatives).

Sur ces sérums, on a calculé le rapport PSA libre activable/(PSA libre dénaturé + PSA libre clivé) obtenu à l'aide des dosages précédents et on a reproduit ces valeurs sur le graphe de la figure 3, partie A.

20 Ainsi que le montre la partie A de la figure 3, en utilisant un seuil de 0,66 pour des sérums ayant un taux de PSA total compris entre 2,5 et 10 ng/ml, le rapport PSA activable/(PSA libre clivé + PSA libre dénaturé) permet de caractériser 22/33 cancers (67%), 19/19 prostates normales (100%) et 27/28 BPH (96%).

A titre de comparaison, on a calculé le rapport PSA libre sur PSA total à l'aide de
25 deux kits Vidas (Kit PSA total et Kit PSA libre, bioMérieux, France) selon les recommandations du fournisseur. Les résultats sont reproduits sur la partie B du graphe de la figure 3. Cette partie B montre qu'il existe une zone d'incertitude pour des valeurs de 0,15 à 0,25.

3.4 Sensibilité du procédé de l'invention

3.4.1 Pour les sérums inclus dans les zones d'incertitude des procédés de l'art antérieur

Les valeurs des rapports PSA libre activable/(PSA libre dénaturé + PSA libre clivé) obtenues selon le procédé de l'invention pour les 28 sérums de la zone d'incertitude
5 obtenue avec le procédé de l'art antérieur ont été reproduites sur la figure 4.

Cette figure met en évidence que, pour les sérums dont le rapport PSA libre/PSA total est compris entre 0,15 et 0,25, sérums dans lesquels les procédés connus ne permettent pas de discriminer un cancer d'une BPH, le rapport PSA activable/(PSA libre clivé + PSA libre dénaturé) permet de caractériser 13/15 cancers (80%), 7/7 BPH (100%) et 6/6 prostates
10 normales (100%).

3.4.2 Pour les sérums ayant un taux de PSA inférieur à 2,5ng/ml

On a sélectionné les 20 sérums de patients atteints de cancer (11) ou de BPH (9) ayant un taux de PSA inférieur à 2,5 ng/ml et on a reproduit les valeurs des rapports PSA libre activable/(PSA libre dénaturé + PSA libre clivé) sur la figure 5.

15 Cette figure met en évidence que la discrimination entre un cancer de la prostate et une BPH en utilisant le rapport PSA activable/(PSA libre dénaturé + PSA libre clivé) reste aussi valable pour des sérums ayant un taux de PSA inférieur à 2,5 ng/ml.

3.5 Modification de l'anticorps de détection

On a répété le mode opératoire ci-dessus avec 8 sérums, 5 sérums de patients
20 atteints de cancer de la prostate et 3 sérums de patients atteints de BPH, à ceci près qu'on a utilisé l'anticorps 11E5C6 (Michel S., et al., 1999, *supra*) comme anticorps de détection.

Les résultats sont indiqués sur la figure 6 sur laquelle les valeurs des rapports PSA libre activable/(PSA libre dénaturé + PSA libre clivé) en utilisant l'anticorps 5D5A5 comme anticorps de détection du PSA activable sont reproduites dans la partie A de la courbe, et les
25 valeurs des rapports PSA libre activable/(PSA libre dénaturé + PSA libre clivé) obtenues avec les mêmes sérums mais avec l'anticorps 11E5C6 comme anticorps de détection sont reproduites dans la partie B.

Cette figure met en évidence qu'il existe bien une valeur-seuil quel que soit l'anticorps de détection utilisé et que la valeur-seuil dépend de l'anticorps utilisé en détection.

Exemple 4 : Détection de la forme libre activable du PSA à partir d'un partenaire de liaison capable de se lier de manière non spécifique au PSA libre activable dans un échantillon biologique

5 1. Echantillons utilisés

On a utilisé neuf sérums individuels possédant des concentrations en PSA total variant de 157 à 3,8 ng/ml et provenant du CHU de Liège, soit de l'hôpital des Armées, Desgenettes, situé à Lyon.

2. Immunopurification du PSA à l'aide de l'anticorps 11E5C6

10 2.1. Couplage de l'anticorps avec des billes

On a introduit dans des tubes 10^8 billes préalablement sensibilisées à la streptavidine (Dynabeads® M-280 Streptavidin, Dynal), soit 150 µl de solution de billes, et on les a lavées 3 fois avec 500 µl de tampon phosphate 0,1 M pH 7,4, NaCl 0,15 M, BSA 0,1% additionné de Tween 20 0,5% (tampon D + T 0,5%). Chaque lavage a été effectué à
15 température ambiante pendant 5 min. sur la roue afin que la solution reste homogène.

Les 10^8 billes ont été couplées avec 500 µl d'anticorps 11E5C6 (bioMérieux, Marcy, France) à 20 µg/ml, soit 10 µg d'anticorps, en tampon D + T 0,05% à température ambiante, pendant 30 min sur la roue. Après le couplage, 5 µl de biotine à 10 mM ont été ajoutés aux 500 µl de solution d'anticorps et incubés 30 min. à température ambiante sur la
20 roue.

Pour éliminer l'excédent de biotine et d'anticorps, les billes ont ensuite été lavées 5 fois avec 500 µl de tampon D + T 0,5% sur la roue pendant 5 min à température ambiante.

2.2. Fixation du PSA

1 ml d'échantillon contenant le PSA (soit du PSA séminal dilué utilisé comme
25 témoin, soit du sérum) a été introduit dans les tubes contenant les 10^8 billes et a été incubé pendant 1 nuit à 4°C.

Après cette période d'incubation, le PSA non fixé a été récupéré et dosé afin de déterminer la quantité de PSA résiduelle.

Trois lavages ont ensuite été effectués, afin de décrocher les protéines fixées de

façon non spécifique, avec 500 µl de tampon D ayant une concentration en Tween 20 de 0,5%.

2.3. *Elution*

Le PSA a été élué pendant 5 min. à température ambiante avec 100 µl de Tris-glycine 0,2 M pH 2,2 additionné de BSA à 1 mg/ml. Le pH acide entraîne la rupture de la
5 liaison PSA-Ac. L'éluat récupéré a été neutralisé avec 11 µl de Tris 0,1 M pH 9,6 afin d'éviter la dégradation de la protéine par l'acidité de la solution et de préserver son activité enzymatique.

3. Dosage des échantillons en PSA libre et PSA total

On a effectué ce dosage en utilisant l'appareil VIDAS (bioMérieux, Marcy,
10 France), en utilisant les kits de dosage mesurant le PSA total (TPSA) et le PSA libre (FPSA), selon les recommandations du fournisseur et selon le protocole suivant : Des anticorps spécifiques dirigés respectivement contre le PSA total ou le PSA libre sont fixés sur les cônes. Pour les deux tests, l'anticorps de détection est l'anticorps 11E5C6 couplé à la phosphatase alcaline, qui catalyse la réaction d'hydrolyse du substrat en produit dont la fluorescence émise
15 est mesurée à 450 nm.

Chaque test nécessite 200 µl d'échantillon qui sont déposés dans la barrette et les résultats sont disponibles en 1h. Le test TPSA a une sensibilité de 0,07 ng/ml de PSA et peut détecter jusqu'à 100 ng/ml de PSA. Le test de FPSA a une sensibilité de 0,05 ng/ml et peut détecter jusqu'à 10 ng/ml de PSA.

4. Mesure de l'activité enzymatique du PSA

4.1. Fixation des anticorps de capture

Les puits d'une plaque ELISA ont été coatés avec 100 µl de streptavine diluée à 10 µg/ml en tampon carbonate pH 9,6, et incubés 2 h à 37°C. Les puits ont ensuite été saturés avec 250 µl de tampon Tris 50 mM + NaCl 0,15 M pH 7,5 (TBS) additionné de BSA à 2
25 mg/ml (TBS + BSA), afin d'éviter les fixations non spécifiques et donc de limiter le bruit de fond. Après 3 lavages en TBS contenant du Tween 20 à 0,05% (TBS + T 0,05%), 100 µl d'anticorps 8G8F5 (bioMérieux, Marcy, France) biotinylé à 10 µg/ml ont ensuite été ajoutés et incubés 2 h à 37°C. Cette étape a été suivie de 3 lavages en TBS + T 0,05%.

4.2. Incubation du PSA

85 µl de PSA dilué en TBS + BSA (PSA sérial ou sérum immunopurifié) ont été introduits dans les puits et incubés 1 nuit à 4°C. Les puits ont ensuite été lavés 3 fois en TBS + T 0.05%, ce qui permet d'éliminer le PSA non fixé. L'enzyme a ensuite été incubée 15 min à 37°C, avec 100 µl du substrat TBS + BSA additionné de NaCl à 1,5 M..

5 4.3. Révélation et dosage

Le substrat KGISSQY-AFC a été dilué dans du TBS + BSA additionné de NaCl à 1,5 M. 100 µl de ce substrat dilué ont ensuite été ajoutés dans les puits et incubés à 37°C. La fluorescence émise a été mesurée toutes les minutes pendant 2 h à 37°C, par l'appareil Fluoroskan (ThermoLabsystem).

10 L'activité enzymatique de l'enzyme a été déterminée par le calcul de la pente de la cinétique et exprimée en unités de fluorescence*1000/min.

5. Résultats

Les résultats sont indiqués dans le tableau 3 ci-dessous.

15

Tableau 3

caractérisation des sérums				mesure de l'activité enzymatique du PSA			
référence des sérums	conc en PSA total (ng/ml)	conc en PSA libre (ng/ml)	rapport PSA libre / PSA total	quantité de PSA libre/puits (ng)	activité enzymatique (unité de fluorescence/min. x 1000)	erreur	activité spécifique (unité de fluorescence/min. x 1000/ ng de PSA libre)
1	152,6	10,4	non applicable	8,12	90	0,1	11,1
2	44,6	5,5	non applicable	2,91	8,5	0,1	2,9
3	20,5	7,4	non applicable	6,28	3,6	0	0,6
4	13,1	3,3	non applicable	1,97	4	0,1	2,1
5	11	2,1	non applicable	1,76	4	0	2,4
6	10,5	2,4	0,23	1,32	3,8	0,1	2,9
7	8,6	2,6	0,30	1,6	4,5	0	2,8
8	5	2,1	0,42	1,22	1,6	0,1	1,3
9	3,8	0,4	0,11	0,25	1,7	0,1	6,8

Parmi ces sérums, les sérums 1 et 9 proviennent de patients confirmés comme étant atteints du cancer de la prostate, ce qui est également confirmé par le procédé de l'invention.

REVENDICATIONS

1. Procédé de diagnostic *in vitro* d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate, caractérisé en ce qu'il comprend l'étape de détection, dans un échantillon biologique issu d'un patient suspecté d'être atteint d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate, de la forme libre activable du PSA.

2. Procédé de diagnostic d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à :

10 i) mettre en contact un partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable avec un échantillon biologique issu d'un patient suspecté d'être atteint d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate,

ii) mettre en évidence la capture de la forme libre activable du PSA par ledit partenaire de liaison,

15 iii) calculer le rapport entre la quantité de forme libre activable de PSA détectée dans l'étape ii) et la quantité d'une forme de PSA autre que la forme libre activable, présente dans un échantillon de même nature prélevé chez le même sujet, et

iv) déterminer si les patients sont affectés par un adénocarcinome de la prostate ou par une pathologie bénigne de la prostate en comparant la valeur du rapport déterminé dans l'étape 20 iii) à une valeur-seuil prédéterminée, choisie selon le type de rapport utilisé et représentative de la limite de détection de chaque pathologie.

3. Procédé de diagnostic d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit partenaire de liaison utilisé dans l'étape i) est capable de reconnaître l'épitope mimé par la séquence SEQ ID N°1.

4. Procédé de diagnostic d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un

adénocarcinome de la prostate selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que ledit partenaire de liaison utilisé dans l'étape i) est un anticorps ou un fragment d'anticorps.

5 5. Procédé de diagnostic d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que la mise en évidence de la capture de la forme libre activable du PSA par ledit partenaire de liaison est mise en œuvre par détection indirecte par l'intermédiaire d'un partenaire de détection, de préférence par l'utilisation d'un anticorps anti-PSA total.

10 6. Procédé de diagnostic d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que la mise en évidence de la capture de la forme libre activable du PSA par ledit partenaire de liaison est mise en œuvre par détermination de l'activité enzymatique de la forme libre activable du PSA immunopurifiée et activée.

15 7. Procédé de diagnostic d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce qu'il utilise, outre le partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable, un anticorps capable d'augmenter l'activité enzymatique du PSA.

20 8. Procédé de diagnostic d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que la forme de PSA autre que la forme libre activable utilisée pour calculer le rapport est la forme libre inactive du PSA ou les formes libres clivées et dénaturées du PSA.

25 9. Kit de diagnostic permettant de diagnostiquer un adénocarcinome de la prostate ou une pathologie bénigne de la prostate, caractérisé en ce qu'il comprend :
- un partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable et
- des moyens pour doser les formes de PSA autres que la forme libre activable.

10. Kit de diagnostic selon la revendication 9, caractérisé en ce que ledit partenaire de liaison est capable de reconnaître l'épitope mimé par la séquence SEQ ID N°1, de préférence un anticorps ou un fragment d'anticorps.

5

1.1. Kit de diagnostic selon l'une des revendications 9 ou 10, caractérisé en ce que lesdits moyens sont des anticorps ou fragments d'anticorps.

12. Conjugué constitué d'un partenaire de liaison capable de se lier spécifiquement au PSA libre activable et de la forme libre activable du PSA.

10

13. Conjugué selon la revendication 12, caractérisé en ce que ledit partenaire de liaison est capable de reconnaître l'épitope mimé par la séquence SEQ ID N°1.

15

14. Conjugué selon l'une des revendications 12 ou 13, caractérisé en ce que la forme libre activable du PSA est activée.

20

15. Procédé de diagnostic d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à :

i) mettre en contact un partenaire de liaison capable de se lier au PSA libre activable de manière non spécifique, avec un échantillon biologique issu d'un patient suspecté d'être atteint d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate,

25

ii) mettre en évidence la capture de la forme libre activable du PSA par ledit partenaire de liaison par détermination de l'activité enzymatique de la forme libre du PSA activée, après activation de la forme libre activable du PSA,

iii) calculer le rapport entre la quantité de forme libre activable de PSA détectée dans l'étape ii) et la quantité d'une forme de PSA autre que la forme libre activable, présente dans un échantillon de même nature prélevé chez le même sujet, et

iv) déterminer si les patients sont affectés par un adénocarcinome de la prostate ou par une pathologie bénigne de la prostate en comparant la valeur du rapport déterminé dans l'étape iii) à une valeur-seuil prédéterminée, choisie selon le type de rapport utilisé et représentative de la limite de détection de chaque pathologie.

5

16. Procédé de diagnostic d'une pathologie bénigne de la prostate ou d'un adénocarcinome de la prostate selon la revendication 15, caractérisé en ce que l'activation de la forme libre activable du PSA est mise en œuvre par utilisation d'un anticorps capable d'augmenter l'activité enzymatique du PSA.

10

1/4

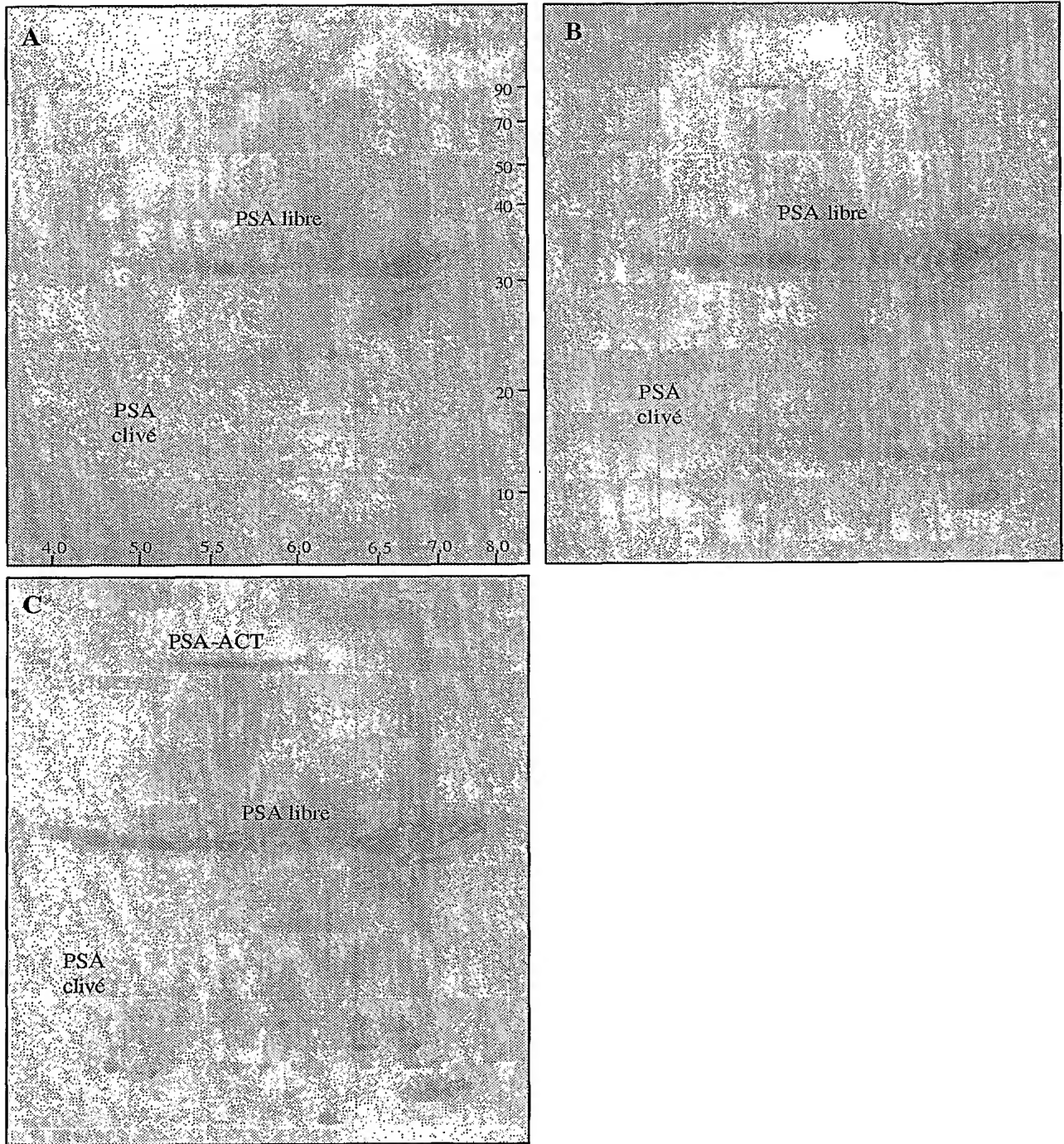


Figure 1

2/4

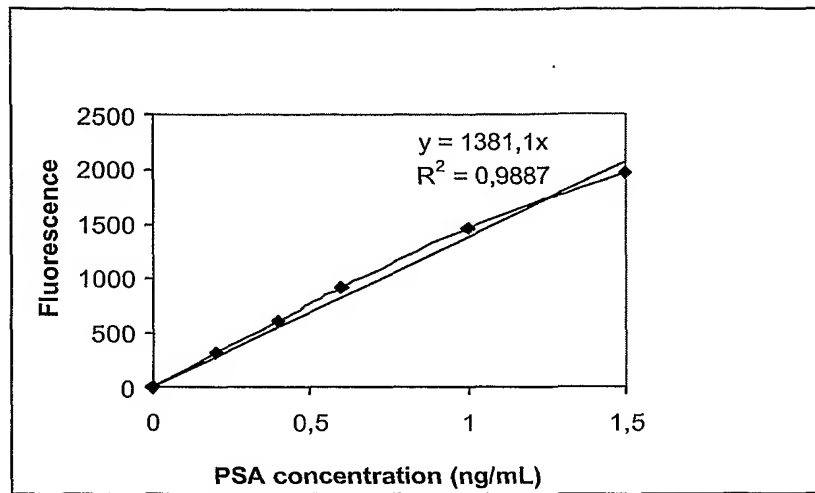


Figure 2

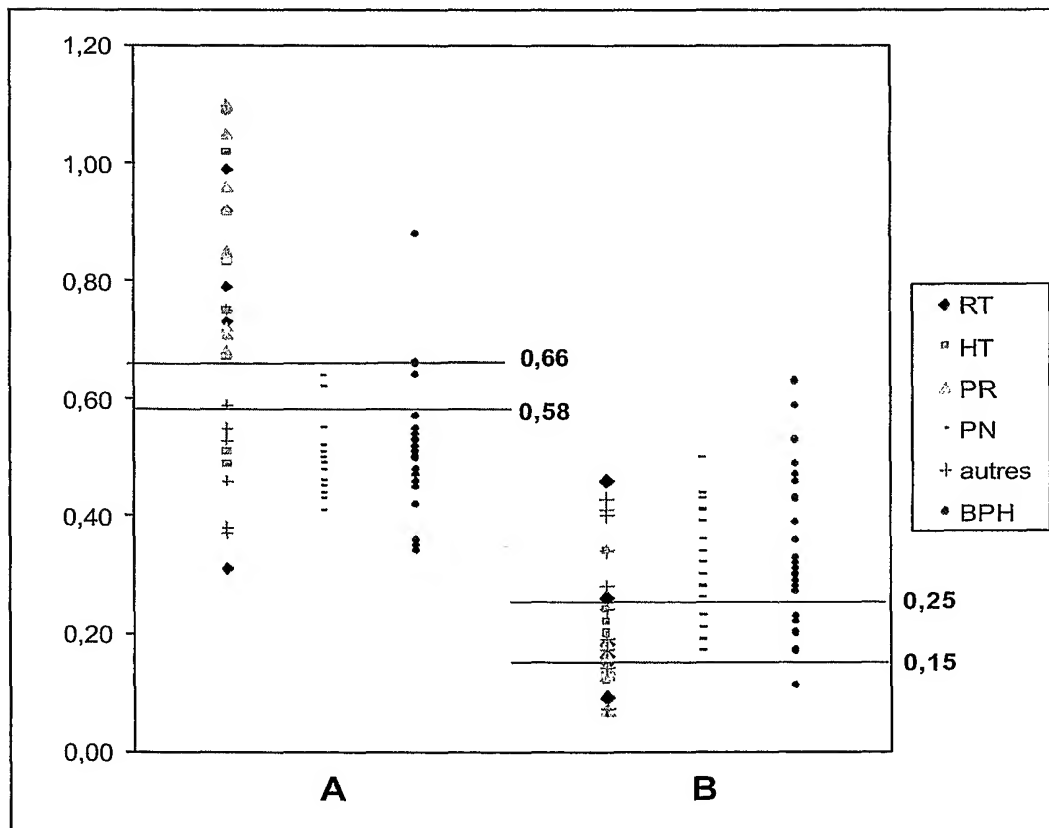


Figure 3

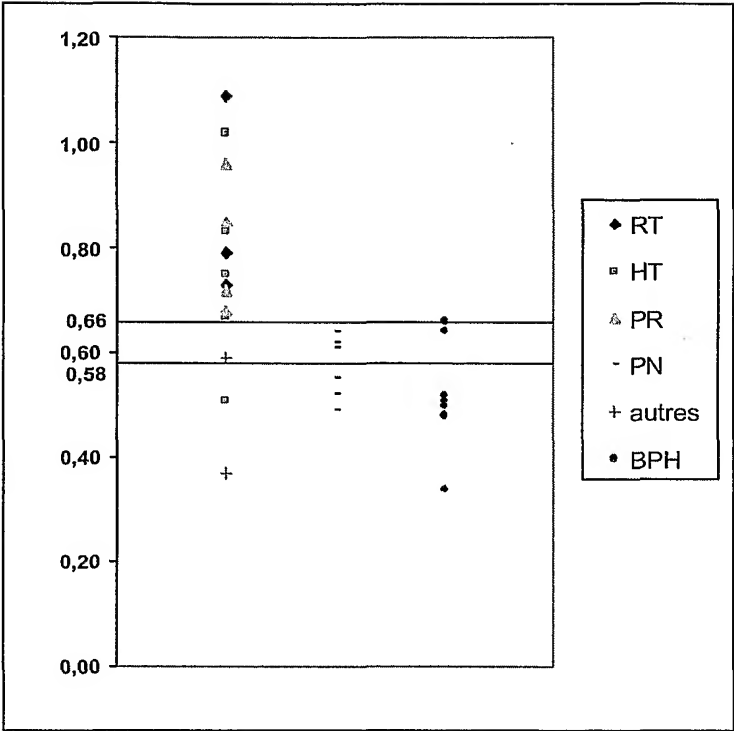


Figure 4

4/4

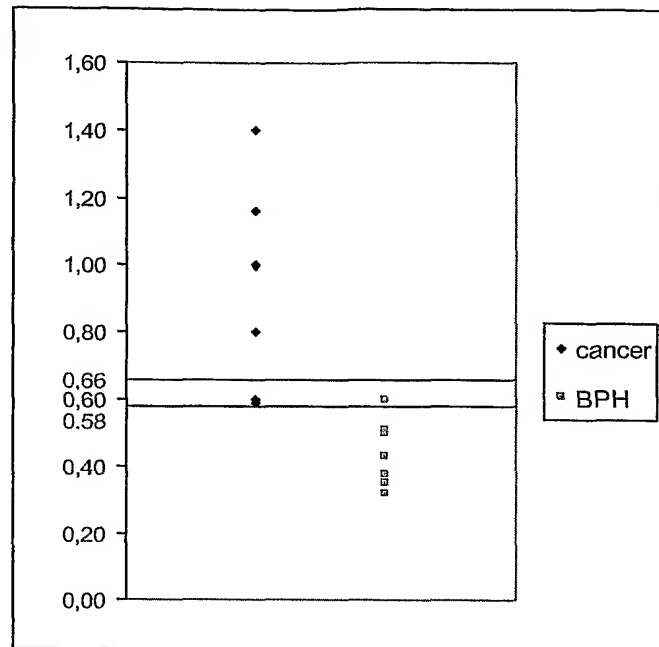


Figure 5

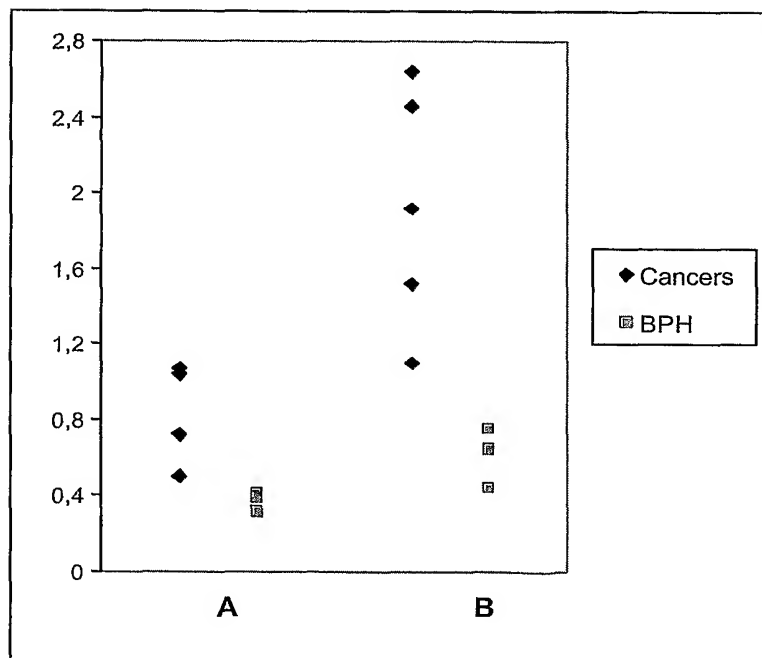


Figure 6

SEQUENCE LISTING

<110> bioMérieux

<120> Procédé de détection de la forme libre activable du PSA et son utilisation pour le diagnostic des pathologies bénignes de la prostate et de l'adénocarcinome de la prostate

<130> PSA Activable

<160> 1

<170> PatentIn version 3.1

<210> 1

<211> 15

<212> PRT

<213> Artificial sequence

<220>

<223> épitope

<400> 1

Asp Thr Pro Tyr Pro Trp Gly Trp Leu Leu Asp Glu Gly Tyr Asp
1 5 10 15